


## MP-60

Bomba de infusión  
modular de 1 canal.

Compatibilidad con Central de Monitoreo  
**MP - 900**

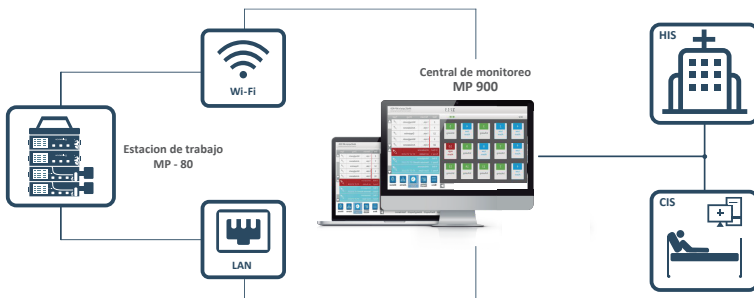

### Pantalla Táctil

Excelente visualización, permite la configuración rápida y exacta.


### 9 Modos de Infusión

Bomba de infusión modular de 1 canal.  
Múltiples programas de infusión.  
Batería recargable de litio.  
Bomba peristáltica.  
Protección contra flujo libre.  
Mecanismo de puerta motorizada.



### Compatibilidad 100% con Set Macro genéricos

Compatibilidad con múltiples set de infusión genéricos (muy económicos)

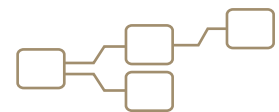

### Arquitectura Modular ¡Sólo basta conectarlas y listo!

Diseño modular, que permite combinar bombas libremente según su necesidad.

## Especificaciones Técnicas

**Modos de Infusión:** Velocidad  
Tiempo  
Peso  
Dosis de carga  
Trapezoides  
Secuencia  
Micro  
Relevo (requiere de estación modular)  
modo de goteo (requiere de sensor de goteo).

**Alimentación:** 100-240 VAC.  
Entrada DC 12V.  
Batería recargable interna.  
(5 horas de trabajo continuo)

**Dimensiones:** 202 (ancho) x 74 (alto) x 133 (profundo) mm.  
**Peso:** 1.2 Kg (incluyendo batería).  
**Precisión:** +/- 5%.

**Rango de Ajuste de Flujo/ Gotas :** 0,1 – 1200,0 ml/hr - Flujo (Set de 20d/ml)  
0 – 400 d/min - Gotas (Set de 20d/ml)  
0,1 – 400,0 ml/hr - Flujo (Set de 60d/ml)  
1 – 400 d/min - Gotas (Set de 60d/ml)  
Incrementos de 0.1 ml/h o 1 d/min.

**Rango de Ajuste de Volumen:** 0 – 99999,99 ml.  
**Purga:** 1200 ml/hr (Set de 20d/ml).

**Bolos:** 0,1 – 1200,0 ml/hr (Set de 20d/ml).  
**KVO:** 0,1 – 5,0 ml/hr.  
**Nivel de Oclusión:** 11 niveles (225 mmHg ~ 975 mmHg)

**Alarmas:** Finalización cercana.  
Medicamento agotado.  
Infusión finalizada.  
Alarma de oclusión.  
Batería baja.  
Batería agotada.  
Sin batería  
Sin fuente de energía.  
Puerta abierta.  
Aire en línea.  
Sin sensor de goteo.  
Sin señal de goteo.  
Error de goteo.  
Alarma de recuerdo.  
Alarma de auto test.  
Alarma infundiendo.

## Accesorios Opcionales:

Sensor de goteo (para modo goteo).  
Estación modular (para modo relevo).  
Escáner de código de barras.  
Botón de llamado a enfermería.  
Central de monitoreo central de infusión.  
Módulo de comunicación wifi.  
(Permite la conexión al sistema de monitoreo central de infusión).

## Portátil y liviano.

Estilo Smart Phone.  
Cambio de flujo en tiempo real.  
Purga.  
Memoria última configuración.  
Fácil apertura de puerta.  
Perilla de ajuste multiposición.  
(4 formas de conexión).

## Seguridad y Confianza:

Seguro de ajuste de riel.  
Detección de error de flujo.  
Protección contra flujo libre en la bomba.  
KVO (mantenimiento de vena abierta).  
Bloqueo de pantalla.  
Recuerdo de Inicio.  
Volumen de sonido ( 11 niveles).

## Características de Software:

Modo nocturno.  
Nivel de luz de fondo intercambiable (5 niveles).  
Estilo de fondo intercambiable (7 fondos).  
Función Stand By.  
Función de ampliación de fuente.  
Recordatorio de mantenimiento.  
Registro de historia (hasta 2000 eventos).  
Administración de información del paciente.

## Conexión:

Tres (3) Puertos USB para conexión de sensor de goteo, Llamada a Enfermería, estación modular o escáner de código de barra.

Modular  
apilable hasta  
15 canales.

## Características de Hardware:

Diseño modular.  
Pantalla táctil.